

Entre en el mundo Cardioline



Nueva grabadora Holter ECG

walk400h

registros de más de 7 días y 12 derivaciones


- Grabaciones de alta resolución con frecuencia de muestreo de hasta 1000 muestras / segundo por 24 horas.
- ECG de reposo equivalente a 12 derivaciones, hasta 24/48 horas.
- Grabaciones de hasta 7 días con solo una pila AA estándar.
- Interfaz de usuario simple e intuitiva. La grabadora está equipada con una pantalla LCD en color con joystick de 4 vías que permite navegar fácilmente por los menús.
- Acelerómetro para detección de actividad, correr, caminar, reposo.
- Grabador de voz para eventos e identificación de pacientes.
- Ligero y pequeño: sólo 100 grs.

Derivaciones ECG	12
Cable paciente	5 latiguillos – 3 canales unipolares 7 latiguillos – 3 canales bipolares 10 latiguillos – 8 canales/12 derivaciones
CMRR	>85 dB
Impedancia de entrada DC	>60MΩ
Convertor A/D	24 bit 96000 muestras/segundos/canal
Resolución	<1 μV/LSB)
Rango dinámico	± 400 mV
Ancho de banda	0,05 - 300 Hz (a 1000 Hz)
Detector marcapasos	Detección de hardware combinada con filtrado de convolución digital. Cumple con 60601-2-47 201.12.4.4.109.
Cable paciente	Detección automática de cable paciente conectado
Duración máxima de grabación	Detección automática de cable paciente conectado 500/1000 muestras/segundo/canal: 48 horas 250 muestras/segundo/canal: 7 días Independiente de números de canales
Registro actividad de paciente	Indicación de actividad de paciente: en reposo, caminando, corriendo.
Memoria interna	16 GB SD tarjeta de datos. Mayor de 100 en grabaciones de 3 canales 24 horas a 250 hz
Transferencia de datos	USB 2.0



La grabación de Holter se puede descargar a través de USB de las grabadoras al software Cardioline Cube-Holter para el análisis e informe.

La grabación Holter de diferentes grabadoras puede ser descargada y enviada a través de Web-Uploader al software Cardioline Cube-Holter para el análisis y generación de informes. Ideal para aplicaciones de teleasistencia.

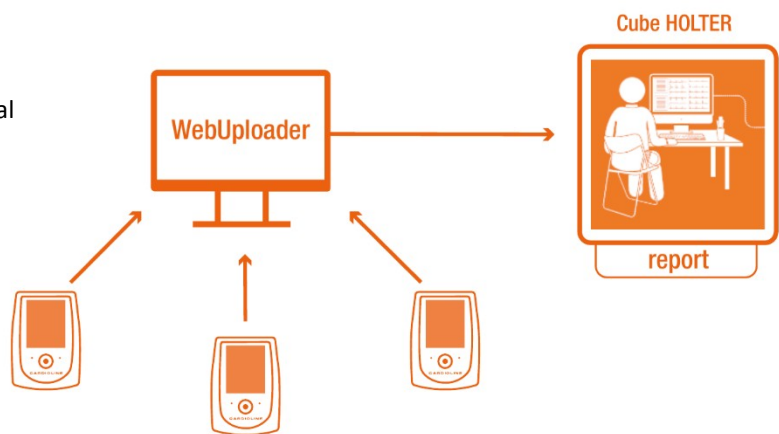

AB MEDICA GROUP S.A.

SEDE CENTRAL c/Jericó 10 bis int. 08035 Barcelona Telf. +34 932 541 540 Fax +34 934 185 140

Oficinas/Almacén Avda. Salvatella, 4 Pol.Ind. Can Salvatella 08210 - Barberá del Vallés (BCN) Telf. +34 937 299 400 Fax +34 937 191 656

Oficina Madrid c/Rodríguez San Pedro, 41 - 28015 Madrid Telf. +34 915 433 559 +34 915 497 755 Fax +34 915 447 578

www.abmedicagroup.com – abmedicagroup@abmedicagroup.com