

Audiómetro MAICO MA 27

Audiómetro de conducción aérea para la detección básica

Fácil de transportar

El estuche, rígido, aunque ligero, con asa integrada y compartimento de almacenamiento no solo protege al audiómetro, sino que también le permite transportarlo en caso de tener prisa. El amplio espacio de almacenamiento permite guardar los audífonos y otros accesorios.

Cuidadosamente diseñado para mediciones precisas

Por ser portátil, el MA 27 está diseñado para ser resistente y portátil. Lleve el MA 27 a cualquier lugar con confianza. ¡El amplio mando de control manual permite ajustar la frecuencia y los niveles de audición de manera rápida y cómoda!

Gama completa de opciones de prueba

El MA 27 ofrece una gama completa de oportunidades de prueba. Las frecuencias varían de 125 Hz a 8000 Hz y la intensidad de la señal va desde -10 dB_{HL} hasta 100 dB_{HL}. El dispositivo se complementa con el tono sinusoidal y gorjeo (pulsado o continuo).

Resumen de características

- Conducción aérea con 11 frecuencias desde 125 hasta 8000 Hz
- Personalizar las frecuencias según sus necesidades
- Operación ecológica con una fuente de alimentación externa aprobada por las autoridades médicas
- Tono puro, de pulso y gorjeo

MA 27E – Opción de actualización

- Hughson-Westlake automático
- Software de base de datos de pacientes



Datos técnicos

ESPECIFICACIONES DEL MA 27

Señales de prueba	Tono sinusoidal y gorjeo (pulsado o continuo).
Frecuencias de prueba en Hz	125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
Pasos	5 o 1 dB
Rango de nivel de audición	-10 dB _{HL} - 100 dB _{HL}
con los audífonos DD45	70 dB _{HL} a 0,125 kHz, 90 dB _{HL} a 0,25 y 8 kHz
Clase de audiómetro	Clase 4 según la norma EN 60 645-1

COMPONENTES ESTÁNDAR

- Audífonos DD45 con diadema HB-7
- Bloc para audiogramas
- Manual de operación
- Guía de uso rápido

ACCESORIOS OPCIONALES

- Prueba de Hughson/Westlake
- Interruptor de respuesta del paciente
- Audífonos Holmco 8103, DD65 y TDH39
- Cable USB
- Software de base de datos de pacientes

GENERAL

Dimensiones	25.5 cm x 37 cm x 15 cm
Peso	2,4 kg (con todos los accesorios)
Fuente de alimentación	Externa, aprobada por las autoridades médicas

NORMAS

EN 60 601-1
EN 60 645-1, tipo 4,
según la directiva de dispositivos médicos
93/42/EEC



EL MA 27E AMPLÍA LA FUNCIONALIDAD DEL MA 27


El MA 27e amplía las funcionalidades del MA 27 con una prueba automática según Hughson-Westlake. Los parámetros se pueden adaptar fácilmente según sus preferencias. La función de transmisión de voz facilita el trabajo con el MA 27E, especialmente en instalaciones con cabina de sonido.

Componentes estándar



Dispositivo MA 27 completo

Accesorios opcionales

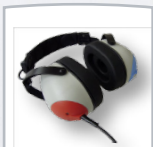

Audífonos Holmco 8103



Audífonos DD65



Audífonos TDH 39



Interruptor de respuesta del paciente

